


COULTER®

Analizador hematológico A C•T™ 5diff

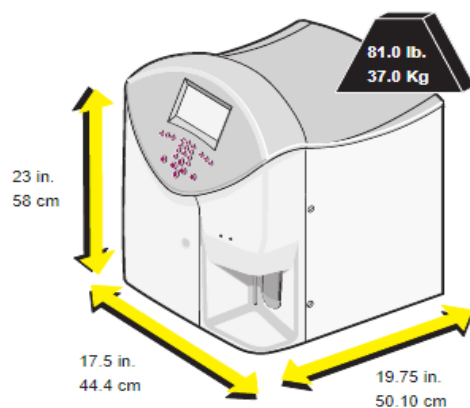

Alimentación eléctrica

Suministro

De 100 VCA a 240 VCA. De 50 Hz a 60 Hz.

Consumo

Máximo de 200 vatios.

Categoría de instalación

El instrumento está diseñado para ser seguro para voltajes transitorios conforme a la Categoría de instalación II y al Grado de contaminación 2.

Requisitos de toma de tierra

Para la protección contra a descargas eléctricas, el enchufe de tierra de pared debe estar correctamente conectado a la instalación de electricidad de toma de tierra del laboratorio.

Temperatura ambiente de funcionamiento

La temperatura ambiente de funcionamiento es de 16 °C a 34 °C. Si el instrumento se guarda a una temperatura inferior a 10 °C, mantenga el instrumento a la temperatura ambiente correcta durante una hora antes de usarlo.

Escala de altitud

Puede utilizar el instrumento a cualquier altitud hasta 3.000 m.

Ubicación recomendada

Coloque el instrumento sobre una superficie limpia nivelada dejando al menos 20 cm de espacio detrás del instrumento para su ventilación.

Comprobación del entorno electromagnético

El instrumento produce una interferencia electromagnética inferior al nivel aceptable si está colocado correctamente. Las interferencias electromagnéticas están limitadas a niveles que permiten el correcto funcionamiento de otros instrumentos conforme a su colocación.

En caso de problemas, compruebe que el instrumento no esté colocado cerca de campos electromagnéticos o de emisiones de onda corta (como radares, equipos de rayos X, escáneres, etc.).



Visite nuestro sitio web www.beckmancoulter.com

